



ИМПЛАНТАТЫ PTERYGO



B&B DENTAL
IMPLANT COMPANY



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крыловидные имплантаты прошли путь эволюции, все чаще применяясь при лечении пациентов с ограниченным объемом кости на верхней челюсти. Дентальный крыловидный имплантат V&B был разработан для закрепления в крыловидно-верхнечелюстной кости, предоставляя альтернативу стоматологам, предлагая практическое решение для их клинических потребностей. Линия V&B Dental Pterygo оснащена фрезами (для обычной и навигационной хирургии), ключами и компонентами, которые обеспечивают оптимальное использование. Линия Pterygo продолжает философию V&B Dental, обладая соединением, характерным для большинства линий (3P, EV, WIDE), и предлагая удобство использования одних и тех же компонентов. Коническое соединение под углом 5° исключает любые микродвижения благодаря стабилизации, обеспечиваемой холодной сваркой между компонентами, ограничивая возможность поломки винта, в то время как шестигранник обеспечивает направленность абатментов, тем самым облегчая протезирование.

ИМПЛАНТАТЫ PTERYGO Ø 4.7



PTI-4716
Ø 4,7 L. 16



PTI-4718
Ø 4,7 L. 18

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ MULTI-USE 40°



***PT-4050/2**

комплектуются винтом INN-5146

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ 40°



PT-2040/2

комплектуются винтом INN-6050



PT-2040/3

*совместим с абатментами типа 17° и 30°

КОНУС МОРЗЕ И ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК

- Точное позиционирование компонентов протеза
- Оптимальный выбор в отношении параллелизма
- Увеличенная площадь контакта между поверхностью имплантата и абатментом
- Высокая стабильность


Полированная шейка для легкого скольжения и стабилизации мягких тканей

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, специально разработанная для содействия остеоинтеграции и стимуляции пролиферации костных клеток



Резьба подходит для различной плотности кости, что идеально для легкого введения имплантата по всей поверхности.

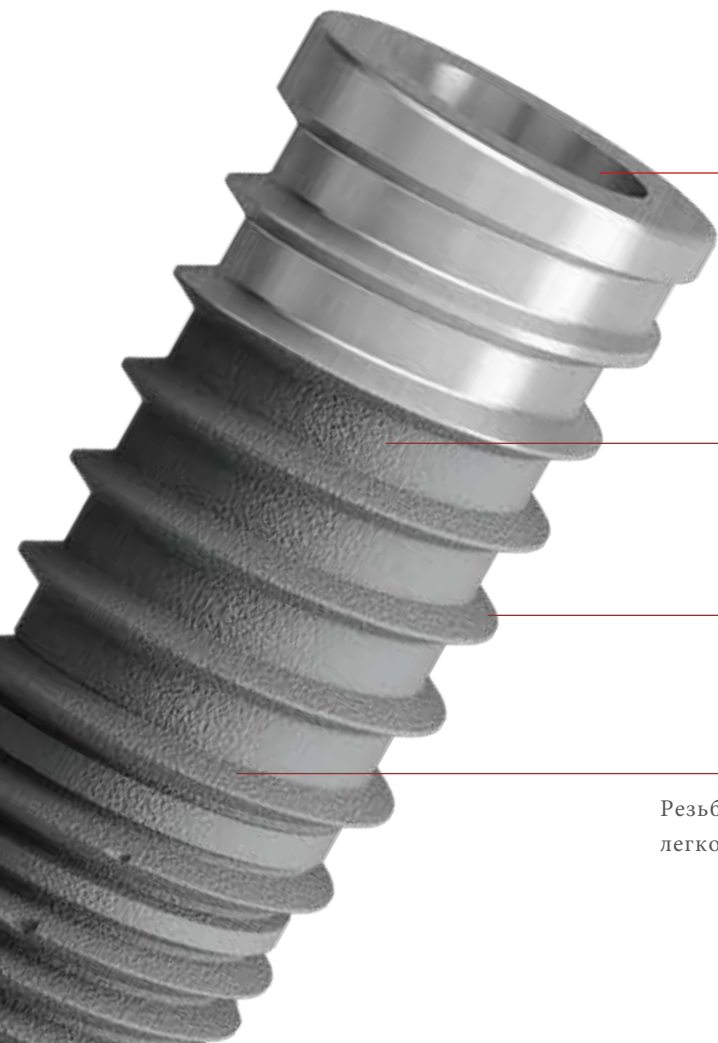



МУКОТОМ
GD-263


КОПЬЕВИДНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ ФРЕЗА
GD-FOG

НАВИГАЦИОННЫЕ ФРЕЗЫ
GD-PT-21
GD-PT-35 / GD-PT-47

СТАНДАРТНЫЕ ФРЕЗЫ
PT-21CUT
PT-35CUT / PT-47CUT

НАВИГАЦИОННЫЕ КОМПАКТОРЫ
7613-PT / 7615-PT

ПРЯМОЙ МАНУАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
3P-00090CM

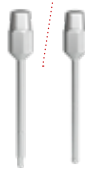

ИМПЛАНТОВОД
INN-00581/L
INN-00590/2

СТОППЕР
STOP18 / STOP16

КЛЮЧИ
PT-01
PT-02

УДЛИНИТЕЛЬ
00236N

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
00376

Хирургический набор Pterygo	PT-00092SC
Ортопедический ключ для линии Pterygo	PT-01
Ортопедический назогастральный ключ для линии Pterygo	PT-02
Навигационная фреза Pterygo \varnothing 2.1	GD-PT-21
Навигационная фреза Pterygo \varnothing 3.5	GD-PT-35
Навигационная фреза Pterygo \varnothing 4.7	GD-PT-47
Фреза Pterygo \varnothing 2.1	PT-21CUT
Фреза Pterygo \varnothing 3.5	PT-35CUT
Фреза Pterygo \varnothing 4.7	PT-47CUT
Навигационный компактор \varnothing 3.0	7613-PT

Навигационный компактор \varnothing 4.7	7615-PT
Мануальный ключ	3P-00090CM
Мукотом	GD-263
Копьевидная фреза	GD-FOG
Импантовод для ключа	INN-00590/2
Импантовод для углового наконечника	INN-00581/L
Стоппер 18	STOP18
Стоппер 16	STOP16
Удлинитель	00236N
Универсальный ключ	00376



Производитель: B&B Dental srl, Via S. Benedetto, 1837 40018 S. Pietro in Casale (BO) Italy
Официальный импортер и дистрибьютор в России и странах СНГ: ООО "Ультра" 192148, Россия,
г. Санкт-Петербург, проспект Елизарова, дом 34, литер А
8 800 333-53-09
8 921 950-02-69 (WhatsApp)
info@beb-dental.ru , www.beb-dental.ru



Certified quality system
UNI EN ISO 13485